

ENGLISH | Instructions for Use

Rinsing & Insertion solution for scleral contact lenses.

Wash your hands with mild soap before handling your scleral contact lenses.


Disinfect and rinse the lens with the solution recommended by your eye care professional.

1

Open the unidose by twisting off the top, taking care to hold it in an upright position.


2

Rinse both sides of the scleral contact lens.

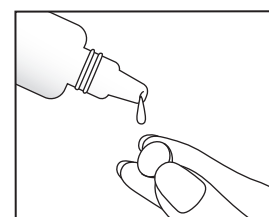

3

Fill the scleral contact lens with **cleadew SLi** before inserting in the eye.
***Be careful not to leave air bubbles.**

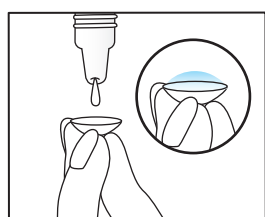

4

Discard the unidose after use. Do not re-use.

FRANÇAIS | Mode d'emploi

Solution pour le rinçage et la pose des lentilles de contact sclérales.

Se laver les mains avec un savon doux avant de manipuler les lentilles de contact sclérales.


Désinfecter et rincer les lentilles avec la solution recommandée par un professionnel de la vue.

1

Ouvrir l'unidose en tournant l'extrémité du haut, en prenant soin de la maintenir en position verticale.


2

Rincer les deux faces des lentilles de contact sclérales.

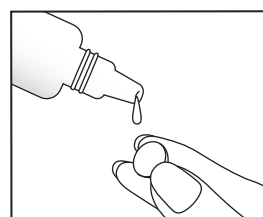

3

Tremper les lentilles de contact sclérales dans la solution **cleadew SLi** avant de les poser sur l'œil.
***Veiller à ne pas laisser de bulles d'air.**

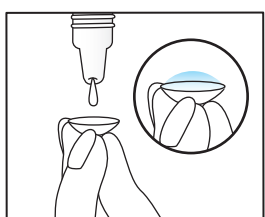

4

Jeter l'unidose après utilisation. Ne pas réutiliser.

DEUTSCH | Gebrauchsanweisung

Lösung zum Abspülen und Einsetzen für Sklerallinsen.

Waschen Sie Ihre Hände vor dem Umgang mit den Skleral-Kontaktlinsen mit einer milden Seife.


Desinfizieren und spülen Sie die Linse mit der von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlenen Lösung ab.

1

Öffnen Sie die Einmaldose indem Sie den Deckel abdrehen. Halten Sie diese dabei aufrecht.


2

Spülen Sie beide Seiten der Sklerallinse ab.

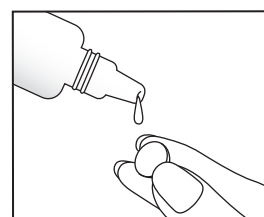

3

Füllen Sie die Skleral-Kontaktlinse mit **cleadew SLi**, bevor Sie die Linse ins Auge einsetzen.
***Achten Sie darauf, dass keine Luftblasen bleiben.**

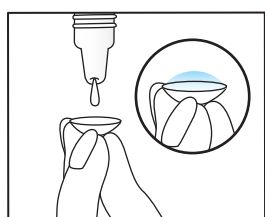

4

Entsorgen Sie die Einmaldose nach dem Gebrauch. Nicht wiederverwenden.

ESPAÑOL | Instrucciones de uso

Solución de enjuague e inserción para lentes de contacto esclerales.

Lávese las manos con jabón suave antes de manipular las lentes de contacto esclerales.


Desinfecte y aclare las lentes con la solución recomendada por su profesional de la visión.

1

Abra la dosis individual girando la parte superior, con cuidado de mantenerla en posición vertical.


2

Enjuague ambos lados de la lente de contacto escleral.

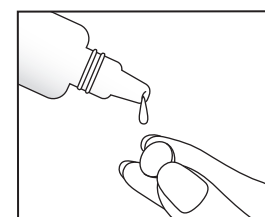

3

Llene la lente de contacto escleral con **cleadew SLi** antes de insertarla en el ojo.
***Tenga cuidado de no dejar burbujas de aire.**

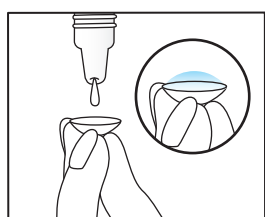

4

Deseche la dosis individual después del uso. No la vuelva a utilizar.

ITALIANO | Istruzioni per l'uso

Soluzione per risciacquo e inserimento di lenti a contatto sclerali.

Lavarsi le mani con sapone neutro prima di maneggiare le lenti a contatto sclerali.

Disinfettare e risciacquare la lente con la soluzione consigliata dal proprio ottico specializzato.

1

Aprire la confezione monodose ruotando la parte superiore, avendo cura di tenerla in posizione verticale.


2

Risciacquare entrambi i lati della lente a contatto sclerale.



3

Riempire la lente a contatto sclerale con **cleadew SLi** prima di inserirla negli occhi.
***Fare attenzione a non lasciare bolle d'aria.**

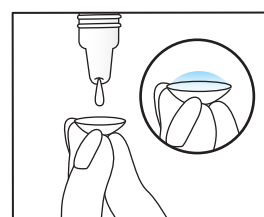

4

Eliminare la confezione monodose dopo l'uso. Non riutilizzare.

NEDERLANDS | Gebruiksaanwijzing

Spoel- en inzetvloeistof voor sclerale contactlenzen.

Was uw handen met een milde zeep voordat u uw sclerale contactlenzen aanraakt.


Spoel en desinfecteer de lens met de vloeistof die door uw contactlensspecialist wordt aangeraden.

1

Open de unidose door de bovenkant eraf te draaien en zorg ervoor dat u deze rechtop vasthoudt.


2

Spoel beide kanten van sclerale contactlens af.

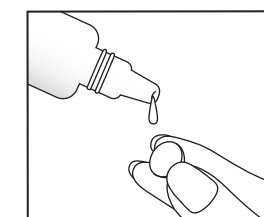

3

Vul de sclerale contactlens met **cleadew SLi** voordat u deze op uw oog plaats.
***Pas op dat u geen luchtballen achterlaat.**

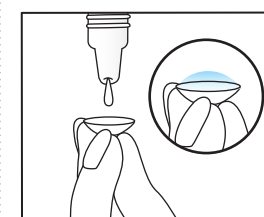

4

Gooi de unidose na gebruik weg. Niet opnieuw gebruiken.

WARNINGS

- Do not use the product if you are allergic to any of the ingredients used in it.
- If you experience such symptoms as eye pain and irritation, remove your lenses immediately and consult your eye doctor or an eye care practitioner.

PRECAUTIONS

- To avoid serious eye infections or damage, always follow your eye care professional's directions and the user instructions.
- cleadew SLi** is single use. Discard any remaining solution.
- Do not use for soft contact lenses.
- cleadew SLi** can not disinfect contact lenses.
- Do not use **cleadew SLi** for the storage of contact lenses.
- Do not swallow the solution. If you do so, drink a large amount of drinking water immediately.
- Do not use the product after the expiry date.
- Do not use the product if the unidose is leaked or damaged.
- Do not use the solution if it is cloudy or discoloured.
- Keep out of reach of children.
- To prevent bacterial contamination, do not transfer the solution to another container, nor replenish it with water or other liquid medical agent.
- Store products at room temperature, avoiding direct sunlight.
- Do not change the contact lens care system without consulting your eye care professional.
- Visit your eye care professional regularly.

INGREDIENTS

potassium chloride (0.13%), sodium chloride, hypromellose, sodium hyaluronate preservative-free

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans sa composition.
- En cas de symptômes comme des douleurs ou irritations des yeux, retirez les lentilles immédiatement et consulter un ophtalmologiste ou un spécialiste des soins oculaires.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Pour éviter des infections ou des lésions oculaires graves, il est impératif de toujours observer les directives d'un professionnel de la vue et les instructions du mode d'emploi.
- La solution **cleadew SLi** est à usage unique. Jeter tout résidu de solution.
- Ne pas utiliser pour les lentilles souples.
- La solution **cleadew SLi** ne peut pas désinfecter les lentilles de contact.
- Ne pas utiliser **cleadew SLi** pour le rangement des lentilles de contact.
- Ne pas avaler la solution. Si cela se produit, boire immédiatement une grande quantité d'eau potable.
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption.
- Ne pas utiliser le produit si l'unidose présente une fuite ou est abîmée.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Pour éviter toute contamination bactérienne, ne jamais transférer la solution dans un autre récipient, ne jamais ajouter d'eau ou un autre agent médical liquide.
- Ranger les produits à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne pas changer de système de nettoyage des lentilles de contact sans consulter un professionnel de la vue.
- Consulter régulièrement un professionnel de la vue.

INGRÉDIENTS

chlorure de potassium (0.13%), chlorure de sodium, hypromellose, hyaluronate de sodium sans conservateur

WARNUNGEN

- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren.
- Sollten Schmerzen bzw. Reizungen der Augen auftreten, entfernen Sie sofort Ihre Kontaktlinsen vom Auge und suchen Ihren Augenarzt auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Befolgen Sie stets die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten und die Bedienungsanleitung, um schwere Augeninfektionen oder -schäden zu vermeiden.
- cleadew SLi** ist für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Entsorgen Sie die übrig gebliebene Lösung.
- Nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet.
- cleadew SLi** kann Kontaktlinsen nicht desinfizieren.
- Verwenden Sie **cleadew SLi** nicht zur Aufbewahrung von Kontaktlinsen.
- Verschlucken Sie die Lösung nicht. Trinken Sie bei versehentlichem Verschlucken sofort eine große Menge Wasser.
- Benutzen Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Einmaldose undicht oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie die Lösung nicht, wenn Sie trüb oder verfärbt ist.
- Bewahren sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Um eine bakterielle Verunreinigung zu vermeiden, dürfen Sie die Lösung nicht in einen anderen Behälter umfüllen oder mit Wasser oder anderen flüssigen medizinischen Mitteln auffüllen.
- Lagern Sie die Produkte bei Raumtemperatur, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Wechseln Sie Ihr Kontaktlinsenpflegesystem nur nach fachkundiger Beratung.
- Besuchen Sie regelmäßig Ihren Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten.

INHALTSSTOFFE

Kaliumchlorid (0.13%), Natriumchlorid, Hypromellose, Natriumhyaluronat
Frei von Konservierungsstoffen

ADVERTENCIAS

- No utilice el producto si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.
- Si tiene síntomas como dolor o irritación oculares, quite las lentes inmediatamente y consulte con su oftalmólogo o un profesional de la visión.

PRECAUCIONES

- Para evitar daños o infecciones graves en los ojos, siga siempre los consejos de su profesional de la visión y las instrucciones de uso.
- cleadew SLi** es de un solo uso. Deseche cualquier resto de la solución.
- No utilice con lentes de contacto blandas.
- cleadew SLi** no desinfecta las lentes de contacto.
- No utilice **cleadew SLi** para el almacenamiento de las lentes de contacto.
- No ingiera la solución. Si lo hace, beba una gran cantidad de agua potable inmediatamente.
- No utilice el producto después de su fecha de caducidad.
- No utilice el producto si la dosis individual tiene fugas o está dañada.
- No utilice la solución si está turbia o decolorada.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Para evitar la contaminación bacteriana, no transfiera la solución a otro recipiente, ni la rellene con agua u otro agente médico líquido.
- Guarde los productos a temperatura ambiente, evitando la luz directa del sol.
- No cambie el sistema para el cuidado de sus lentes de contacto sin antes consultar con su profesional de la visión.
- Visite al profesional de la visión regularmente.

INGREDIENTES

cloruro de potasio (0.13%), cloruro de sodio, hipromelosa, hialuronato de sodio sin conservantes

AVVERTENZE

- Non utilizzare in caso di allergia agli ingredienti del prodotto.
- In caso di sintomi quali dolori o irritazioni agli occhi, rimuovete immediatamente le lenti e consultare il proprio oculista o uno specialista.

PRECAUZIONI

- Per evitare gravi infezioni o danni agli occhi, seguire sempre attentamente le indicazioni dell'ottico specializzato e le istruzioni per l'uso.
- cleadew SLi** è monouso. Eliminare qualsiasi residuo della soluzione.
- Non utilizzare il prodotto con lenti a contatto morbide.
- cleadew SLi** non è in grado di disinfettare le lenti a contatto.
- Non utilizzare **cleadew SLi** per la conservazione delle lenti a contatto.
- Non ingerire la soluzione. In caso contrario, bere una grande quantità di acqua potabile immediatamente.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.
- Non usare il prodotto se la confezione monodose perde o è danneggiata.
- Non utilizzare la soluzione se è torbida o scolorita.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare la contaminazione batterica, non trasferire tale soluzione in un altro contenitore, né rabboccare lo stesso con acqua o altri agenti medici liquidi.
- Conservare i prodotti a temperatura ambiente, evitando la luce solare diretta.
- Non cambiare il sistema di cura delle lenti a contatto senza aver prima consultato il proprio specialista.
- Visitare regolarmente il proprio ottico specializzato.

INGREDIENTI

cloruro di potassio (0.13%), cloruro di sodio, ipromellosa, ialuronato di sodio senza conservanti

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik het product niet indien u allergisch bent voor een van de ingrediënten.
- Haal de lenzen direct uit uw ogen en raadpleeg een oogarts of contactlensspecialist in geval van symptomen zoals oogpijn of oogirritatie.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Om serieuze ooginfecties of schade te voorkomen, moet u altijd de aanwijzingen van uw contactlensspecialist en de gebruiksaanwijzing opvolgen.
- cleadew SLi** is voor eenmalig gebruik. Gooi de resterende oplossing weg.
- Gebruik het product niet voor zachte contactlenzen.
- cleadew SLi** kan contactlenzen niet desinfecteren.
- Gebruik **cleadew SLi** niet voor de opslag van contactlenzen.
- De oplossing niet inslikken. Als u dit toch doet, moet u onmiddellijk een grote hoeveelheid water drinken.
- Gebruik het product niet nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- Gebruik het product niet als de unidose heeft gelekt of beschadigd is.
- De oplossing niet gebruiken wanneer deze troebel of verkleurd is.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Om risico op bacteriële verontreiniging te voorkomen, de vloeistof niet overbrengen naar een andere houder, niet aanvullen met water of een andere vloeistof.
- Bewaar producten op kamertemperatuur, vermijd daarbij blootstelling aan direct zonlicht.
- Raadpleeg uw contactlensspecialist alvorens van verzorgingssysteem voor contactlenzen te wisselen.
- Plan regelmatig een bezoek aan uw contactlensspecialist.

BESTANDDELEN

kaliumchloride (0.13%), natriumchloride, hypromellose, natriumhyaluronaat vrij van conserveermiddelen