

e INDICACIONES:
Lacrifresh Aloe es un producto multidosis sin conservante que está especialmente indicado para el alivio de las irritaciones leves de los ojos provocadas por la contaminación, ambientes secos o cargados de polvo, humo, prolongado de lentes de contacto, agua cristalina (piscinas) y otros agentes irritantes.

También está indicado para la humectación y lubricación de lentes de contacto. En usuarios de lentes de contacto proporciona una alta lubricación facilitando su colocación, mejorando el confort visual y el porte de la lente. El producto es compatible con todo tipo de lentes de contacto.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Usar, aplicar y cerrar las manos antes de la aplicación. 2. Coger un frasco de **Lacrifresh Aloe**, tirar del precinto de seguridad en sentido contrario a las agujas del reloj y retirar la tapa protectora. 3. Uso directo: Instalar una o dos gotas en cada ojo y parpadear varias veces. 4. Uso en lente de contacto: Aplicar una o dos gotas en la cara interna de la lente antes de llevarla al ojo. 5. Después de cada administración vuelva a colocar la tapa protectora. 6. Utilizar el producto según sus necesidades hasta un máximo de 8 veces al día. Fecha de la última revisión: 2017/03.




PRECAUCIONES:
• No tocar y mantener fuera del alcance de los niños. • No usar el producto en caso de alergia a alguno de sus componentes. • En caso de reacción adversa o molestia, consultar con un especialista. • Una vez abierto el frasco, utilice el producto durante un máximo de 90 días. • Evitar que la punta del envase entre en contacto con los ojos o cualquier otra superficie para evitar su contaminación. • No apriete el frasco con la tapa protectora colocada. • No utilizar el producto si el precinto de seguridad está roto o dañado, o si envase está dañado. • Conservar el producto a temperatura ambiente. • No utilizar después de la fecha de caducidad. • No usar el producto en combinación con un tratamiento farmacológico o cualquier otro producto que se aplique sobre la superficie ocular, ya que podría alterar las funciones de ambos. • Mantener el frasco bien cerrado después de cada uso.


COMPOSICIÓN: Aloe vera, hipromelosa, electrolitos esenciales (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) en solución acuosa, lamparina e isotónica.

nl GEBRUIK:
Lacrifresh Aloe is een conserveermiddelvrij product voor multidosis, speciaal bestemd voor het verlichten van de symptomen van milde oogirritaties door verontreiniging, droge of stoffige omgevingen, rook, verneveling van contactlenzen, gechloreerd water (zwembaden) en andere irriterende stoffen.

Het is ook aangewezen voor de bevochtiging en lubrificatie van contactlenzen. Voor de dragen van contactlenzen heeft het een uitstekende lubrificatie, wat het inlopen van de lens gemakkelijker maakt, het visueel comfort verhoogt en het dragen van de lens verbetert. Dit product is compatibel met alle soorten contactlenzen.

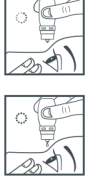

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Was, spoel en droog uw handen alvorens dit product te gebruiken. 2. Neem een fles **Lacrifresh Aloe**, draai de verzegeling linksom en verwijder de beschermkap. 3. Direct gebruik: breng één of twee druppels aan in elk oog en knipper meerdere malen. 4. Gebruik met contactlenzen: breng één of twee druppels op de binnenzijde van beide lenzen druppelen alvorens deze op het oog te plaatsen. 5. De beschermkap na iedere toediening terugplaatsen. 6. Gebruik het product, naargelang uw behoeften, tot 8 keer per dag. Datum van laatste herziening: 2017/03.

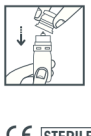

VOORZORGSMAATREGELEN:
• Niet indrukken en buuten het bereik van kinderen houden. • Gebruik het product niet als allergisch bent voor een van de bestanddelen. • Als u opgevoerd of een overgevoeligheidsreactie, gelieve een specialist te raadplegen. • Als de lens normaal is geopend, kan het product maximaal 90 dagen worden gebruikt. • Zorg ervoor dat de punt van de fles nooit in contact komt met het oog of andere oppervlakken om besmetting te voorkomen. • Niet in de fles knippen met de beschermkap erop. • Het product niet gebruiken als de verzegeling is verbroken of erwaarschijnlijk van de fles is beschadigd. • Het product bij kamertemperatuur bewaren. • Het product niet gebruiken als de verzegeling is verbroken of erwaarschijnlijk van de fles is beschadigd. • Niet stuwosw product in polgoren; 2. Tira un embotijado de **Lacrifresh Aloe**, retirar el scudo de seguridad en el tornante dnta la sems invsrse des aguljas. 3. Uso directo: colocar una o dos gotas en cada ojo y parpadear varias veces. 4. Uso con lentes de contacto: aplicar una o dos gotas en la parte interna de cada lente antes de colocarla en el ojo. 5. Después de cada administración, volver a colocar a lampa de protecto. 6. Usar el producto conforme necesario, ale 8 veces por día. Data de última revisión: 2017/03.

PRECAUCIONES:
• No tocar y mantener fuera del alcance de los niños. • No usar el producto en caso de alergia a alguno de sus componentes. • En caso de reacción adversa o molestia, consultar con un especialista. • Una vez abierto el frasco, utilice el producto durante un máximo de 90 días. • Evitar que la punta del envase entre en contacto con los ojos o cualquier otra superficie para evitar su contaminación. • No apriete el frasco con la tapa protectora colocada. • No utilizar el producto si el precinto de seguridad está roto o dañado, o si envase está dañado. • Conservar el producto a temperatura ambiente. • No utilizar después de la fecha de caducidad. • No usar el producto en combinación con un tratamiento farmacológico o cualquier otro producto que se aplique sobre la superficie ocular, ya que podría alterar las funciones de ambos. • Mantener el frasco bien cerrado después de cada uso.

COMPOSICIÓN: Aloe vera, hipromelosa, electrolitos esenciales (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) en solución acuosa, lamparina e isotónica.

gb USAGE:
Lacrifresh Aloe is a preservative-free multi-dose product specially intended to relieve the symptoms of mild eye irritations caused by pollution, dry or dusty environments, smoke, prolonged use of contact lenses, chlorinated water (swimming pools) and other irritant agents.

It is also indicated for the wetting and lubrication of contact lenses. For contact lens wearers, it provides excellent lubrication, making it easier to insert the lens, improving visual comfort and the wearing of the lens. This product is compatible with all kinds of contact lenses.

INSTRUCTIONS FOR USE:
1. Wash, rinse and dry hands before using this product. 2. Take a bottle of **Lacrifresh Aloe**, pull the safety seal anticlockwise and remove the protective cap. 3. Direct use: Apply one or two drops onto each eye and blink several times. 4. Use with contact lenses: Apply one or two drops into the internal part of each lens before placing on the eye. 5. After each administration, replace the protective cap. 6. Use the product according to your needs, up to 8 times a day. Last revision date: 2017/03.

PRECAUTIONS:
• Do not ingest the solution, and keep it out of children's reach. • Do not use the product if you are allergic to any of its ingredients. • If you experience ocular irritation or an adverse reaction, please consult a specialist. • Once the bottle is opened, use the product for a maximum of 90 days. • Ensure that the tip of the bottle does not come into contact with the eyes, or any other surface, to avoid contamination. • Do not squeeze the bottle with the protective cap on. • Do not use the product if the safety seal is broken or missing, or if the bottle is damaged. • Store the product at room temperature. • Do not use the product after the expiry date. • Do not use the product in combination with a pharmaceutical treatment or any other product that is applied on the ocular surface, as the functions of both could be altered. • Keep the bottle tightly closed after each use.

COMPOSITION: Aloe vera, hypromellose, essential electrolytes (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) in aqueous, buffered and isotonic solution.

f USAGE:
Lacrifresh Aloe est un produit multidosis sans conservateur indiqué spécialement pour soulager les symptômes d'irritation oculaire légère provoquée par la pollution, les environnements secs ou poussiéreux, la fumée, le port prolongé de lentilles de contact, l'eau chlorée (piscines) et autres agents irritants.

Il est également indiqué pour humidifier et lubrifier les lentilles de contact. Pour les porteurs de lentilles de contact, il permet une excellente lubrification, facilitant la pose des lentilles, tout en améliorant le confort visuel et le porte de celles-ci. Ce produit est compatible avec tous les types de lentilles de contact.

MODE D'EMPLOI :
1. Laver et sécher ses mains puis les sécher avant utilisation. 2. Prendre un flacon de **Lacrifresh Aloe**, retirer le scudo de sécurité en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirer la capote de protection. 3. Utilisation directe: Verser une ou deux gouttes dans chaque oeil et cligner des yeux plusieurs fois. 4. Utilisation avec des lentilles de contact: Verser une ou deux gouttes sur la surface interne de chaque lentille avant de la placer sur l'œil. 5. Après l'usage, remplacez le capot de protection après chaque usage. 6. Utiliser le produit selon vos besoins, jusqu'à 8 fois par jour. Date de la dernière révision: 03/2017.

PRÉCAUTIONS :
• Ne pas ingérer la solution, et la garder hors de portée des enfants. • Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un de ses composants. • En cas d'irritation oculaire ou d'effet indésirable, consulter un spécialiste. • Une fois le flacon ouvert, le délai d'utilisation est de 90 jours maximum. • Assurez-vous que le bout du flacon n'entre pas en contact avec les yeux, ou avec toute autre surface, afin d'éviter la contamination. • Ne pas utiliser le produit après la date de validité. • Ne pas utiliser le produit si le scudo de sécurité est endommagé ou manquant, ou si le flacon est endommagé. • Conservier le produit à température ambiante. • Ne pas utiliser le produit après la date de péremption. • Ne pas utiliser le produit avec un traitement pharmacologique ou tout autre produit appliqué sur la surface oculaire, afin d'éviter toute interaction médicamenteuse. • Bien refermer le flacon après chaque usage.

COMPOSITION : Aloe vera, hypromellose, électrolytes essentiels (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) en solution aqueuse, tamponnée et isotonique.

p APLICACIONES:
Lacrifresh Aloe es un producto multidosis sin conservantes, especialmente indicado para aliviar los síntomas de irritaciones oculares ligeras provocadas por polución, ambientes secos y polvorientos, humo, utilización prolongada de lentes de contacto, agua clorada (piscinas) y otros agentes irritantes.

También está indicado para humidificar y lubricar lentes de contacto. Para los usuarios de lentes de contacto, proporciona excelente lubricación, facilitando la colocación de las lentes, aumentando el confort ocular e de utilización. Este producto es compatible con todos los tipos de lentes de contacto.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN:
1. Lavar y secar as mãos antes de usar este produto. 2. Tirar uma embalagem de **Lacrifresh Aloe**, rodar o scudo de segurança no sentido anti-horário e retirar a tampa de proteção. 3. Uso direto: colocar uma ou duas gotas em cada olho e piscar várias vezes. 4. Uso com lentes de contato: aplicar uma ou duas gotas na parte interna de cada lente antes de colocá-la no olho. 5. Depois de cada administração, voltar a colocar a tampa de proteção. 6. Usar o produto conforme necessário, até 8 vezes por dia. Data da última revisão: 2017/03.

PRECAUÇÕES:
• Não ingerir a solução e manter fora do alcance das crianças. • Não utilizar o produto em caso de alergia a qualquer um dos seus ingredientes. • Em caso de irritação ocular ou reação adversa, consultar um especialista. • Após a abertura do embotijado, descartar o produto após 90 dias. • Certificar-se de que o bico do embotijado não entra em contacto com os olhos, nem com qualquer outra superfície, para evitar contaminação. • Não apertar a embalagem com a tampa de proteção colocada. • Não utilizar o produto se o scudo de segurança estiver quebrado ou ausente, ou se a embalagem estiver danificada. • Conservar o produto à temperatura ambiente. • Não utilizar o produto após a data de validade. • Não utilizar o produto em combinação com um tratamento farmacológico ou com qualquer outro produto que seja aplicado na superfície ocular, pois as funções de ambos podem sofrer alterações. • Manter a embalagem bem fechada após cada utilização.

COMPOSIÇÃO: Aloe vera, hipromelosa, electrolitos essenciais (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) numa solução aquosa tampoadora e isotónica.

i APPLICAZIONE:
Lacrifresh Aloe è un prodotto multidoso privo di conservanti appositamente studiato per alleviare i sintomi di lievi irritazioni dell'occhio causate da inquinamento, ambienti secchi o carichi di polvere, fumo, uso prolungato di lenti a contatto, acqua clorata (piscine) e altri agenti irritanti.

È indicato anche per ammorbidire e lubrificare le lenti a contatto. Fornisce a coloro che indossano lenti a contatto un'eccellente lubrificazione, facilitandone l'inserimento e migliorando il comfort visivo e l'uso delle lenti. Questo prodotto è compatibile con tutti i tipi di lenti a contatto.

ISTRUZIONI PER L'USO:
1. Prima di utilizzare il prodotto, lavarsi, asciugare e assicurarsi le mani. 2. Prendere un flacone di **Lacrifresh Aloe**, tirare il sigillo di sicurezza. In senso antiorario e rimuovere il cappuccio protettivo. 3. Uso diretto: instillare una o due gocce in ciascun occhio e sbattere le palpebre per diverse volte. 4. Uso con le lenti a contatto: instillare una o due gocce nella parte interna di ciascuna lente prima di collocarla sull'occhio. 5. Scalfare il cappuccio protettivo dopo ogni somministrazione. 6. Utilizzare il prodotto secondo le proprie esigenze, fino a 8 volte al giorno. Data di ultima revisione: 03/2017.

PRECAUZIONI:
• Non ingerire la soluzione e tenerla fuori dalla portata dei bambini. • Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti. • In caso di irritazione oculare o reazione avversa, consultare uno specialista. • Una volta aperto il flacone, utilizzare il prodotto per un massimo di 90 giorni. • Assicurarsi che la punta del flacone non venga a contatto con gli occhi o con qualsiasi altra superficie al fine di evitare contaminazioni. • Non schiacciare il flacone con il cappuccio protettivo innestato. • Non utilizzare il prodotto se il sigillo di sicurezza è rotto o mancante o se il flacone è danneggiato. • Conservare il prodotto a temperatura ambiente. • Non usare il prodotto dopo la data di scadenza. • Non utilizzare il prodotto in combinazione con un trattamento farmacologico e con qualsiasi altro prodotto che venga applicato sulla superficie oculare, in quanto le funzioni di entrambi potrebbero essere alterate. • Tenere il flacone ben chiuso dopo ogni uso.

COMPOSIZIONE: Aloe vera, ipromelosa ed elettroliti essenziali (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) in una soluzione acquosa, tamponata e isotonica.

d GEBRAUCHSANWEISUNG:
Lacrifresh Aloe ist ein Produkt zur Anwendung in mehreren Dosen ohne Konservierungsstoffe zur Linderung der Symptome leichter Augenreizungen. Tragen von Kontaktlinsen, ein trockenes oder staubiges Umfeld, Rauch, zu langes Tragen von Kontaktlinsen, mit Chlor behaftetes Wasser (Schwimmbäder) und andere reizende Substanzen.

Es ist auch zur Benetzung und Gleitreibung von Kontaktlinsen indiziert. Für Kontaktlinsenträger sorgt es für eine hervorragende Gleitreibung, was das Einsetzen der Linse erleichtert sowie den Sehkomfort und das Tragen der Linse verbessert. Dieses Produkt ist mit allen Arten von Kontaktlinsen kompatibel.

ANWENDUNG:
1. Vor dem Gebrauch des Produktes die Hände waschen, abtrocknen und abtrocknen. 2. Gegen den Uhrzeigersinn am Sicherheitsgipfel einer Flasche **Lacrifresh Aloe** ziehen und die Schutzkappe entfernen. 3. Direkte Anwendung: Einen oder zwei Tropfen auf jedes Auge träufeln und mehrmals blinzeln. 4. Anwendung mit Kontaktlinsen: Vor dem Einsetzen der Linse einen oder zwei Tropfen auf die innere Seite der Linse träufeln. 5. Nach jeder Verwendung die Schutzkappe wieder aufsetzen. 6. Das Produkt nach Bedarf bis zu 8-mal täglich verwenden. Datum der letzten Neuauswertung: 2017/03.

WARNHINWEISE:
• Lösung nicht einnehmen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. • Produkt bei Allergien gegen einen der Bestandteile nicht verwenden. • Wenn Nebenwirkungen oder Beschwerden auftreten, einen Spezialisten aufsuchen. • Nach dem Öffnen der Flasche das Produkt maximal 90 Tage lang verwenden. • Schien Sie darauf, dass die Flaschenzippung nicht mit den Augen oder anderen Oberflächen in Kontakt kommt, um eine Kontamination zu vermeiden. • Nicht auf die Flasche drücken, wenn die Schutzkappe aufgesetzt ist. • Nicht verwenden, wenn das Sicherheitsgipfel beschädigt ist oder fehlt oder die Flasche beschädigt ist. • Bei Zimmertemperatur aufbewahren. • Nach dem Verfalldatum das Produkt nicht mehr verwenden. • Nicht in Kombination mit anderen pharmakologischen Behandlungen oder Produkten zur Anwendung auf der Augenscheitel verwenden, um zu vermeiden, dass ihre Wirkung gegenseitig beeinflusst wird. • Die Flasche nach jedem Gebrauch fest verschlossen halten.

ZUSAMMENSETZUNG: Aloe vera, Hypromellose, essentielle Elektrolyte (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) in wässriger, gepufferter und isotonischer Lösung.

la GEBRUIK:
Lacrifresh Aloe is een conserveermiddelvrij product voor multidosis, speciaal bestemd voor het verlichten van de symptomen van milde oogirritaties door verontreiniging, droge of stoffige omgevingen, rook, verneveling van contactlenzen, gechloreerd water (zwembaden) en andere irriterende stoffen.

Het is ook aangewezen voor de bevochtiging en lubrificatie van contactlenzen. Voor de dragen van contactlenzen heeft het een uitstekende lubrificatie, wat het inlopen van de lens gemakkelijker maakt, het visueel comfort verhoogt en het dragen van de lens verbetert. Dit product is compatibel met alle soorten contactlenzen.

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Was, spoel en droog uw handen alvorens dit product te gebruiken. 2. Neem een fles **Lacrifresh Aloe**, draai de verzegeling linksom en verwijder de beschermkap. 3. Direct gebruik: breng één of twee druppels aan in elk oog en knipper meerdere malen. 4. Gebruik met contactlenzen: breng één of twee druppels op de binnenzijde van beide lenzen druppelen alvorens deze op het oog te plaatsen. 5. De beschermkap na iedere toediening terugplaatsen. 6. Gebruik het product, naargelang uw behoeften, tot 8 keer per dag. Datum van laatste herziening: 2017/03.

VOORZORGSMAATREGELEN:
• Niet indrukken en buuten het bereik van kinderen houden. • Gebruik het product niet als allergisch bent voor een van de bestanddelen. • Als u opgevoerd of een overgevoeligheidsreactie, gelieve een specialist te raadplegen. • Als de lens normaal is geopend, kan het product maximaal 90 dagen worden gebruikt. • Zorg ervoor dat de punt van de fles nooit in contact komt met het oog of andere oppervlakken om besmetting te voorkomen. • Niet in de fles knippen met de beschermkap erop. • Het product niet gebruiken als de verzegeling is verbroken of erwaarschijnlijk van de fles is beschadigd. • Het product bij kamertemperatuur bewaren. • Het product niet gebruiken als de verzegeling is verbroken of erwaarschijnlijk van de fles is beschadigd. • Niet stuwosw product in polgoren; 2. Tira un embotijado de **Lacrifresh Aloe**, retirar el scudo de seguridad en el tornante dnta la sems invsrse des aguljas. 3. Uso directo: colocar una o dos gotas en cada ojo y parpadear varias veces. 4. Uso con lentes de contacto: aplicar una o dos gotas en la parte interna de cada lente antes de colocarla en el ojo. 5. Después de cada administración, volver a colocar a lampa de protecto. 6. Usar el producto conforme necesario, ale 8 veces por día. Data de última revisión: 2017/03.

PRECAUCIONES:
• No ingerir la solución e mantener fuera del alcance de los niños. • No utilizar el producto en caso de alergia a cualquier uno de sus ingredientes. • En caso de irritación ocular o reacción adversa, consultar un especialista. • Una vez abierto el embotijado, descartar el producto después de 90 días. • Certificar-se de que o bico do embotijado não entra em contacto com os olhos, nem com qualquer outra superfície, para evitar contaminação. • Não apertar a embalagem com a tampa de proteção colocada. • Não utilizar o produto se o scudo de segurança estiver quebrado ou ausente, ou se a embalagem estiver danificada. • Conservar o produto à temperatura ambiente. • Não utilizar o produto após a data de validade. • Não utilizar o produto em combinação com um tratamento farmacológico ou com qualquer outro produto que seja aplicado na superfície ocular, pois as funções de ambos podem sofrer alterações. • Manter a embalagem bem fechada após cada utilização.

COMPOZIÇÃO: Aloe vera, hipromelosa, electrolitos essenciais (Cl⁻, Na⁺, Ca²⁺, K⁺, Mg²⁺) numa solução aquosa tampoadora e isotónica.

ok STOSOWANIE:
Lacrifresh Aloe to niezawierający konserwantów produkt wielodawkowy przeznaczony specjalnie do łagodzenia objawów niepokojących podrażnienia oczu wywołanego przez zanieczyszczenia, suchą powiewną albo pył, dym, przedłużone stosowanie soczewek kontaktowych, chlorowaną wodę (w basenach) oraz inne szkodliwie drażniące.

Dot je også indkøbt til lysning og smøring af kontaktlens. Det giver kontaktlensdragerne fremragende smøring, gør det lettere at sætte linser, forbedrer visuel komfort og gør det lettere at bære kontaktlens. Dette produkt er kompatibel med alle typer kontaktlens.

BRUGSANSVIJNING:
1. Vask og skyld dine hænder for brug af produktet. 2. Tag en flaske **Lacrifresh Aloe**, træk sikkerhedsdækslet med uret og fjern beskyttelseslinsen. 3. Direkte brug: Dryp en eller to dråber i hvert øje og blink flere gange. 4. Brug med kontaktlens: Påfør en eller to dråber ind i den indre del af hver linse, før den sættes i øjet. 5. Sæt beskyttelseslinsen på igen efter hver anvendelse. 6. Brug produktet efter behov, op til 8 gange dagligt. Dato for sidste revision: 2017/03.

FORHOLDSREGLER:
• Vask og skyld dine hænder for brug af produktet. 2. Tag en flaske **Lacrifresh Aloe**, træk sikkerhedsdækslet med uret og fjern beskyttelseslinsen. 3. Direkte brug: Dryp en eller to dråber i hvert øje og blink flere gange. 4. Brug med kontaktlens: Påfør en eller to dråber ind i den indre del af hver linse, før den sættes i øjet. 5. Sæt beskyttelseslinsen på igen efter hver anvendelse. 6. Brug produktet efter behov, op til 8 gange dagligt. Dato for sidste revision: 2017/03.

FORHOLDSREGLER:
• Vask og skyld dine hænder for brug af produktet. 2. Tag en flaske **Lacrifresh Aloe**, træk sikkerhedsdækslet med uret og fjern beskyttelseslinsen. 3. Direkte brug: Dryp en eller to dråber i hvert øje og blink flere gange. 4. Brug med kontaktlens: Påfør en eller to dråber ind i den indre del af hver linse, før den sættes i øjet. 5. Sæt beskyttelseslinsen på igen efter hver anvendelse. 6. Brug produktet efter behov, op til 8 gange dagligt. Dato for sidste revision: 2017/03.

FORHOLDSREGLER:
• Vask og skyld dine hænder for brug af produktet. 2. Tag en flaske **Lacrifresh Aloe**, træk sikkerhedsdækslet med uret og fjern beskyttelseslinsen. 3. Direkte brug: Dryp en eller to dråber i hvert øje og blink flere gange. 4. Brug med kontaktlens: Påfør en eller to dråber ind i den indre del af hver linse, før den sættes i øjet. 5. Sæt beskyttelseslinsen på igen efter hver anvendelse. 6. Brug produktet efter behov, op til 8 gange dagligt. Dato for sidste revision: 2017/03.

no BRUK:
Lacrifresh Aloe er et produkt uten konserveringsmiddel (bevaringsmiddel) spesielt beregnet til lindring av symptomer på milde iritasjoner forårsaget av forurensning, tørre eller støvete miljøer, røyk, langvarig bruk av kontaktlens, klorert vann (svømmebasseng) og andre irriterende stoffer.

Dot je også indkøbt til lysning og smøring af kontaktlens. Det giver kontaktlensdragerne fremragende smøring, gør det lettere at sætte linser, forbedrer visuel komfort og gør det lettere at bære kontaktlens. Dette produkt er kompatibel med alle typer kontaktlens.

BRUKSANSVIJNING:
1. Vask og skyld dine hænder for bruk av produktet. 2. Ta en flaske med **Lacrifresh Aloe**, trek av sikkerhetsplåsten i retning med klokken, og ta av beskyttelseslinsen. 3. Direkte bruk: Dryp én eller to dråper i hvert øye og blink flere ganger. 4. Bruk med kontaktlens: Dryp én eller to dråper inn på den indre siden av hver linse før du setter den inn på øyet. 5. Sett beskyttelseslinsen tilbake igjen etter hver anvendelse. 6. Bruk produktet etter behov, opp til 8 ganger daglig. Dato for siste revisjon: 2017/03.

FORHOLDSREGLER:
• Vask og skyld dine hænder for bruk av produktet. 2. Ta en flaske med **Lacrifresh Aloe**, trek av sikkerhetsplåsten i retning med klokken, og ta av beskyttelseslinsen. 3. Direkte bruk: Dryp én eller to dråper i hvert øye og blink flere ganger. 4. Bruk med kontaktlens: Dryp én eller to dråper inn på den indre siden av hver linse før du setter den inn på øyet. 5. Sett beskyttelseslinsen tilbake igjen etter hver anvendelse. 6. Bruk produktet etter behov, opp til 8 ganger daglig. Dato for siste revisjon: 2017/03.

FORHOLDSREGLER:
• Vask og skyld dine hænder for bruk av produktet. 2. Ta en flaske med **Lacrifresh Aloe**, trek av sikkerhetsplåsten i retning med klokken, og ta av beskyttelseslinsen. 3. Direkte bruk: Dryp én eller to dråper i hvert øye og blink flere ganger. 4. Bruk med kontaktlens: Dryp én eller to dråper inn på den indre siden av hver linse før du setter den inn på øyet. 5. Sett beskyttelseslinsen tilbake igjen etter hver anvendelse. 6. Bruk produktet etter behov, opp til 8 ganger daglig. Dato for siste revisjon: 2017/03.

FORHOLDSREGLER:
• Vask og skyld dine hænder for bruk av produktet. 2. Ta en flaske med **Lacrifresh Aloe**, trek av sikkerhetsplåsten i retning med klokken, og ta av beskyttelseslinsen. 3. Direkte bruk: Dryp én eller to dråper i hvert øye og blink flere ganger. 4. Bruk med kontaktlens: Dryp én eller to dråper inn på den indre siden av hver linse før du setter den inn på øyet. 5. Sett beskyttelseslinsen tilbake igjen etter hver anvendelse. 6. Bruk produktet etter behov, opp til 8 ganger daglig. Dato for siste revisjon: 2017/03.

it VORTIUMS:
Lacrifresh Aloe yra daugiausia preparatas be konservantų, specialiai skirtas palengvinti nemalonių simptomų atšalinimą, kurį sukelia užterštis, sausas ar dulkių aplinkos, dūmai, ilgalaikis kontaktinis lygi nešiojimas, chloruotas vanduo (pilsnamų baseinai) ir kiti dirginantys medžiagos.

Preparatas pat patiktas drėkin ir tepti kontaktinėms lėšoms. Kontaktinėms lėšoms nešiojantis asmenims jis užtikrina puikią tepimą, todėl įėjus, lengviau patį, pagerėja rega ir padidėja su lygi naudojimo suvokis komfortas. Šis preparatas galima vartoti nešiojant vių tipų kontaktines lėšas.

BRUKSANSVIJNING:
1. Vask og skyld dine hænder for bruk av produktet. 2. Ta en flaske med **Lacrifresh Aloe**, trek av sikkerhetsplåsten i retning med klokken, og ta av beskyttelseslinsen. 3. Direkte bruk: Dryp én eller to dråper i hvert øye og blink flere ganger. 4. Bruk med kontaktlens: Dryp én eller to dråper inn på den indre siden av hver linse før du setter den inn på øyet. 5. Sett beskyttelseslinsen tilbake igjen etter hver anvendelse. 6. Bruk produktet etter behov, opp til 8 ganger daglig. Dato for siste revisjon: 2017/03.

FORHOLDSREGLER:
• Vask og skyld dine hænder for bruk av produktet. 2. Ta en flaske med **Lacrifresh Aloe**, trek av sikkerhetsplåsten i retning med klokken, og ta av beskyttelseslinsen. 3. Direkte bruk: Dryp én eller to dråper i hvert øye og blink flere ganger. 4. Bruk med kontaktlens: Dryp én eller to dråper inn på den indre siden av hver linse før du setter den inn på øyet. 5. Sett beskyttelseslinsen tilbake igjen etter hver anvendelse. 6. Bruk produktet etter behov, opp til 8 ganger daglig. Dato for siste revisjon: 2017/03.

FORHOLDSREGLER:
• Vask og skyld dine hænder for bruk av produktet. 2. Ta en flaske med **Lacrifresh Aloe**, trek av sikkerhetsplåsten i retning med klokken, og ta av beskyttelseslinsen. 3. Direkte bruk: Dryp én eller to dråper i hvert øye og blink flere ganger. 4. Bruk med kontaktlens: Dryp én eller to dråper inn på den indre siden av hver linse før du setter den inn på øyet. 5. Sett beskyttelseslinsen tilbake igjen etter hver anvendelse. 6. Bruk produktet etter behov, opp til 8 ganger daglig. Dato for siste revisjon: 2017/03.

FORHOLDSREGLER:
• Vask og skyld dine hænder for bruk av produktet. 2. Ta en flaske med **Lacrifresh Aloe**, trek av sikkerhetsplåsten i retning med klokken, og ta av beskyttelseslinsen. 3. Direkte bruk: Dryp én eller to dråper i hvert øye og blink flere ganger. 4. Bruk med kontaktlens: Dryp én eller to dråper inn på den indre siden av hver linse før du setter den inn på øyet. 5. Sett beskyttelseslinsen tilbake igjen etter hver anvendelse. 6. Bruk produktet etter behov, opp til 8 ganger daglig. Dato for siste revisjon: 2017/03.

lv LIETUJOMS:
Lacrifresh Aloe ir konservants nesaturēts, vairāku dienu izstrādājums, īpaši paredzēts, lai samazinātu simptomus, ko izraisa piesārņojums, sausa vai puteļainā vide, dūmi, ilgstoša kontaktlēcņu lietošana, hlorēts ūdens (peldbaseini) un citas kairinojošas vielas.

Tas ir arī indikāts kontaklēnām mīkstināšanai un eļļošanai. Kontaktlēnām nešādotājiem šis līdzeklis nodrošina ārkārtoti labu mitrināšanu, padarot lēnām ieviešanu, uzlabot redzēšanu komfortu un padarot lēnām ērtākas lietošanas. Šis uzstrādājums ir saderīgs ar visām kontaklēnām.

BRUKSANSVIJNING:
1. Vask og skyld dine hænder for bruk av produktet. 2. Ta en flaske med **Lacrifresh Aloe**, trek av sikkerhetsplåsten i retning med klokken, og ta av beskyttelseslinsen. 3. Direkte bruk: Dryp én eller to dråper i hvert øye og blink flere ganger. 4. Bruk med kontaktlens: Dryp én eller to dråper inn på den indre siden av hver linse før du setter den inn på øyet. 5. Sett beskyttelseslinsen tilbake igjen etter hver anvendelse. 6. Bruk produktet etter behov, opp til 8 ganger daglig. Dato for siste revisjon: 2017/03.

FORHOLDSREGLER:
• Vask og skyld dine hænder for bruk av produktet. 2. Ta en flaske med **Lacrifresh Aloe**, trek av sikkerhetsplåsten i retning med klokken, og ta av beskyttelseslinsen. 3. Direkte bruk: Dryp én eller to dråper i hvert øye og blink flere ganger. 4. Bruk med kontaktlens: Dryp én eller to dråper inn på den indre siden av hver linse før du setter den inn på øyet. 5. Sett beskyttelseslinsen tilbake igjen etter hver anvendelse. 6. Bruk produktet etter behov, opp til 8 ganger daglig. Dato for siste revisjon: 2017/03.

FORHOLDSREGLER:
• Vask og skyld dine hænder for bruk av produktet. 2. Ta en flaske med **Lacrifresh Aloe**, trek av sikkerhetsplåsten i retning med klokken, og ta av beskyttelseslinsen. 3. Direkte bruk: Dryp én eller to dråper i hvert øye og blink flere ganger. 4. Bruk med kontaktlens: Dryp én eller to dråper inn på den indre siden av hver linse før du setter den inn på øyet. 5. Sett beskyttelseslinsen tilbake igjen etter hver anvendelse. 6. Bruk produktet etter behov, opp til 8 ganger daglig. Dato for siste revisjon: 2017/03.

FORHOLDSREGLER:
• Vask og skyld dine hænder for bruk av produktet. 2. Ta en flaske med **Lacrifresh Aloe**, trek av sikkerhetsplåsten i retning med klokken, og ta av beskyttelseslinsen. 3. Direkte bruk: Dryp én eller to dråper i hvert øye og blink flere ganger. 4. Bruk med kontaktlens: Dryp én eller to dråper inn på den indre siden av hver linse før du setter den inn på øyet. 5. Sett beskyttelseslinsen tilbake igjen etter hver anvendelse. 6. Bruk produktet etter behov, opp til 8 ganger daglig. Dato for siste revisjon: 2017/03.